



ZIBOJECT S.A.S.
AGUJAS HIPODÉRMICAS

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO

AGUJAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DESECHABLES DE USO ÚNICO:

Dispositivo médico estéril diseñado para penetrar atraumáticamente al tejido permitiendo la entrada o salida de sustancias al organismo en cualquier parte del cuerpo humano en conjunto con una jeringa y/o cualquier otro dispositivo.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Empaque íntegro unitario, estéril en bolsa de polietileno-polipropileno o en papel grado médico/polietileno-polipropileno.

Presentación caja primaria: Caja x 100 Unidades.

Presentación caja corrugada: 100 Cajas primarias.

Total en unidades por caja corrugada: 10.000 Unidades.

FABRICANTE

JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO, LTD.

COMPONENTES Y MATERIALES:

Producto elaborado con material atóxico, no pirógeno de conformidad con PHARM DE P.R. CHINA Y BP.

A. COMPONENTES:

a. Cánula:

Fabricada en acero inoxidable 304(1Cr18NiTi), en su extremo posee un bisel tridimensional largo y siliconado, lo cual permite una punción no traumática para el paciente, su función es penetrar al tejido permitiendo así la entrada de soluciones al organismo.

b. Cono Luer:

Polipropileno PP. HT -022, cumple con la conicidad Luer 6%.

c. Tapa Protectora:

Polipropileno PP. HT-022, su función es proteger la cánula hasta la utilización del producto.

B. EMPAQUE:

a. Empaque individual:

- ✓ Bolsa Plástica de doble capa (Película de Polietileno/polipropileno).
- ✓ Papel grado médico (Película de Polietileno/polipropileno).

b. Caja Interna:

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es – zibobject@yahoo.es

www.zibobject.com


Bucaramanga - Colombia



Elaborado en 350g de Cartón Blanco, contiene 100 unidades de agujas.			
c. Caja de Cartón: Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de Nombre del producto, Lote, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto.			
Teniendo en cuenta las especificaciones de las agujas, realizamos la clasificación por colores:			
REF.	Color Cono	Longitud de la Aguja	Dimensiones Diámetro exterior X grosor de pared de la cánula
16G	Blanco	1 ½"	1.60 X 0.90mm
18G	Rosado	1" – 1 ¼" – 1 ½"	1,20 X 0.73mm
19G	Beige	1" – 1 ¼" – 1 ½"	1,10 X 0.90mm
20G	Amarillo	1" – 1 ¼" – 1 ½"	0,90 X 0.49mm
21G	Verde	1" – 1 ¼" – 1 ½"	0,80 X 0.42mm
22G	Negro	1" – 1 ¼" – 1 ½"	0,70 X 0.35mm
23G	Azul claro	1" – 1 ¼" – 1 ½"	0,62 X 0.29mm
24G	Morado	1"	0,55 X 0.27mm
25G	Naranja	5/8" – 1"	0,50 X 0.23mm
26G	Café	½"	0,45 X 0.23mm
27G	Gris	½"	0,40 X 0.19mm
30G	Amarilla	½" – 1"	0,30 X 0,18mm
Cada empaque lleva impreso la referencia del producto, número de lote de fabricación y fecha de vencimiento del producto.			

VIDA ÚTIL
5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto.
CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES
Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. Temperatura: 5 °C a 55 °C Humedad Relativa: 30 % a 80 %

AGUJAS HIPODÉRMICAS

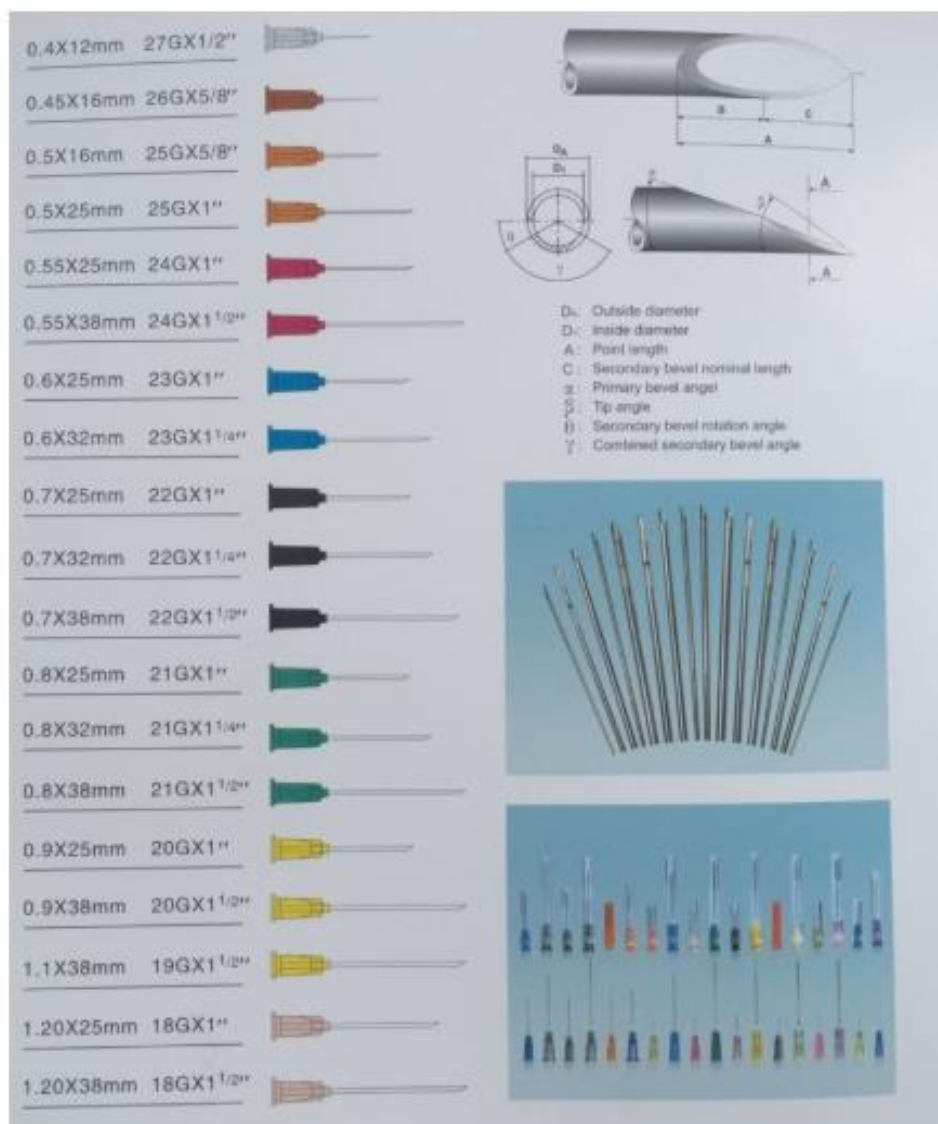

NORMAS APLICABLES

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 7804
- ISO 10993-1
- ISO 10993-7
- ISO 9001

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es – zibobject@yahoo.es

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia