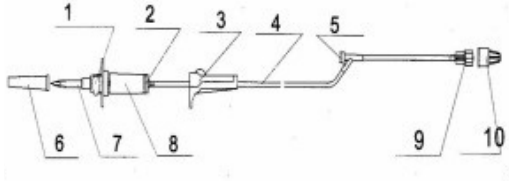


PRODUCTO	Set de infusión: Equipo de Venocclisis Microgoteo		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2016DM-0000144-R1
			USOS El equipo de Microgoteo es utilizado para administrar soluciones y/o medicamentos a través de un acceso venoso, central o periférico, principalmente en pacientes pediátricos o en aquellos pacientes que requieren una infusión con volúmenes más precisos y controlados pero no necesariamente, colocados mediante una bomba de infusión. 60 microgotas = 1ml, Factor de Goteo: 1	
CARACTERÍSTICAS				
1. Colocar lo del tubo 2. Conector Luer Lock: resina 100% 3.0 cm 3. Puerto en Y: Caucho natural, libre de látex 4. Regulador de Flujo: PVC Grado médico, tipo rueda 5. Cámara de goteo: PVC Grado médico, transparente, micro tubo en acero inoxidable, garantiza las microgotas; con y sin filtro en su parte inferior; puerta de venteo en su parte superior (Air vent plástico) 6. Punzón universal: PVC Grado médico rígido para garantizar la perforación al frasco o la bolsa de solución				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
- MDD 93/42EEC - EN 550 ISO 594-2 ISO 13485 ISO 9001:2000		5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. Temperatura: 5°C a 55°C Humedad Relativa: 30% a 80%
		PRESENTACIÓN - Empaque individual - Caja por 50 unidades - Caja por 100 unidades		
				
1. ENTRADA DE AIRE CON FILTRO: Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y filtro de nylon. 2. FILTRO DE FLUIDO: Nylon. 3. REGULADOR DE FLUJO: Polietileno de alta densidad. 4. TUBO: Policloruro de vinilo PVC 5. PUNTO DE INYECCION EN "Y": Polipropileno y Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 6. CAPSULA PROTECTORA DEL PUNZON: Polietileno de alta densidad. 7. DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPAY): Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 8. CAVIDAD DE GOTEO (CAMARA DE GOTEO): Policloruro de Vinilo – PVC. 9. PRUEBA CRONICA FEMENINA: Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 10. CAPSULA PROTECTORA DE PRUEBA CRONICA FEMENINA: Polietileno de alta densidad.				