


PRODUCTO	EQUIPO BURETA 150ML		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO., LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2025DM-0000151-R2
			USOS	
			La Bureta ZIBOJECT, es un dispositivo médico estéril de un solo uso, el cual consiste en un tubo graduado hasta 150ml con el objetivo de pasar medicamentos diluidos o paso de líquidos en poca cantidad principalmente el pacientes pediátricos. Se utiliza en conjunto con los Equipos de venoclisis, Macrogoteo y/o Microgoteo, los cuales van conectados a un acceso venoso.	
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
1. PUNZON O SPAY: con punta diseñada en PVC rígido Grado Médico para perforar los frascos con corcho o las bolsas de viaflex; viene con venteo para facilitar el paso de los líquidos por gravedad en los frascos 2. LLAVE REGULADORA: Sistema de rueda en PVC Rígido grado médico para graduar el goteo desde la solución a la Bureta. 3. TAPA SUPERIOR: en ABS blanca, contiene * filtro de aire con su respectiva tapa de seguridad compuesto por fibras de membrana * punto para la administración de los medicamentos, libre de látex, recubierto de elastómero autosellable. * Colgadera en PVC flexible para facilitar la colocación de la Bureta en el atril. 4. TUBO DE ALMACENAMIENTO: elaborado en celulosa que permite colapsar el cuerpo sin daños ni memoria; escala volumetrica de 0 a 150ml , pilograda, no borrrable. 5. TAPA INFERIOR: en ABS blanca con tubo en PVC Grado médico para conexión al equipo de venoclisis. 6. PROTECTOR DEL PUNZON Y EL TUBO CONECTOR.				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
• ISO2859-1:1999 • ISO2859-1:1999		5 años años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.		
		PRESENTACIÓN		
		• Empaque individual • Caja por 100 unidades		

ELEMENTOS

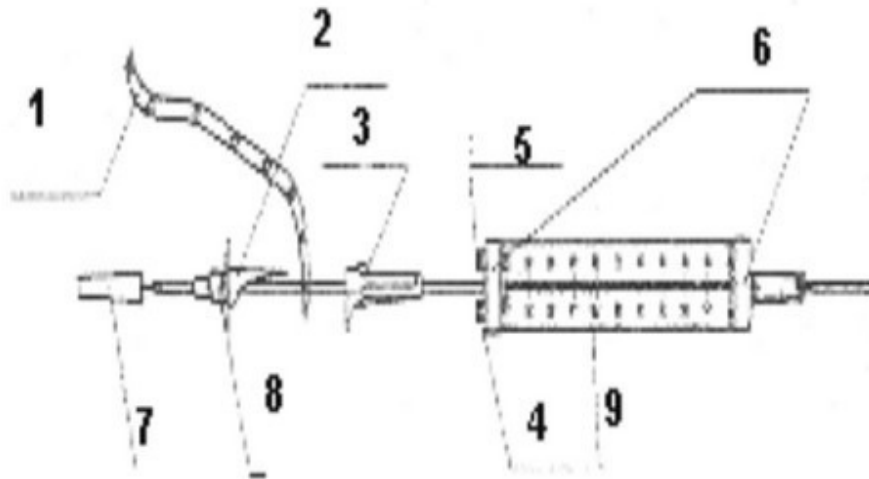

1. Abrazadera:
2. Ventana del Punzón:
3. Regulador de Flujo:
4. Punto de Inyección:
5. Filtro de entrada de aire:
6. Tapas de la bureta:
7. Filtro de fluido:
8. Regulador de flujo:
9. Tubo:

Policloruro de vinilo (PVC).
 Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
 Polietileno de alta densidad (PE).
 Caucho para uso médico.
 Nylon.
 Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
 Nylon.
 Polietileno de alta densidad (PE).
 Policloruro de vinilo (PVC).